

نگهداری صحیح ملزومات مصرفی پزشکی




نگهداری صحیح، کیفیت را حفظ می‌کند
و ایمنی بیمار را تضمین می‌کند.

اصول کلیدی نگهداری



کنترل دما و رطوبت

دمای مناسب و رطوبت کنترل شده را حفظ کنید.

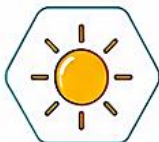

دور از نور مستقیم

ملزومات را از نور مستقیم خورشید و منابع حرارتی دور نگه دارید.



محیط خشک

در محیط خشک و بدون رطوبت نگهداری شود.



چیدمان مناسب

چیدمان منظم و با فاصله کافی بین کالاها رعایت شود.



عدم انباشت

از انباشت بیش از حد ملزومات در قفسه‌ها خودداری کنید.



قابلیت مشاهده

محصولات باید به راحتی قابل مشاهده و دسترس باشند.



ایمنی و تمیزی

محل نگهداری تمیز، ایمن و عاری از آلودگی باشد.

موارد مهم در نگهداری



بررسی تاریخ انقضا به صورت منظم



استفاده از سیستم FIFO (اولین ورودی، اولین خروجی)



جلوگیری از تماس مستقیم با کف و دیوار



نگهداری در بسته‌بندی اصلی و سالم



جدا نگه داشتن محصولات آسیب‌دیده یا تاریخ گذشته



رعایت ظرفیت مجاز قفسه و کابینت‌ها

شرایط محیطی مناسب



دما

معمولاً بین 15 تا 25 درجه سانتی‌گراد (مطابق دستورالعمل محصول)



رطوبت نسبی

بین 0% تا 50%



نور

دور از نور مستقیم خورشید و نور فلورسنت شدید



تهویه

محیط دارای تهویه مناسب باشد

چه مواردی را نباید انجام دهیم؟



قرار دادن ملزومات کنار بخاری یا منابع حرارتی



نگهداری در محیط مرطوب یا دارای نشی آب



قرار دادن اجسام سنگین روی بسته‌بندی‌ها



باز کردن بسته‌بندی استریل قبل از زمان مصرف



استفاده از ملزومات تاریخ گذشته



عواقب نگهداری نامناسب



کاهش کیفیت و کارایی محصول



افزایش احتمال آلودگی و عفونت



اتلاف منابع مالی



ایجاد خطر برای بیمار و کارکنان



عدم انطباق با استانداردها و مقررات

نکات طلایی



بازرسی دوره‌ای از موجودی انبار انجام دهید.



آموزش کارکنان در خصوص اصول نگهداری صحیح.



ثبت و مستندسازی شرایط نگهداری و انقضای آنها.



نظارت مستمر بر شرایط محیطی انبار.

نمونه چیدمان استاندارد



محصولات سبک در طبقات بالا

محصولات یرمصرف در سطح دسترس

محصولات سنگین در طبقات پایین



حداقل فاصله از کف: ۱۰ سانتی‌متر
فاصله از دیوار: ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر



برای مشاهده آموزش‌های بیشتر اسکن کنید.



ایمنی بیمار، مسئولیت ماست
با رعایت اصول نگهداری،
به سلامت بیماران کمک کنیم.

واحد تجهیزات پزشکی
بیمارستان امام حسن (ع)
استان همدان

